

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ NUVITA

1. Гарантия действительна только при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи и печатю.
2. Ремонт/обмен проводится только в течение гарантийного срока.
3. Серийный номер и модель должны соответствовать указанным в талоне.
4. Гарантия не распространяется на следующие повреждения:
 - механические повреждения корпуса;
 - повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов и/или жидкости;
 - повреждения, вызванные стихийными бедствиями, пожарами, неблагоприятными бытовыми факторами (например, повышенная влажность);

- быстроизнашивающиеся детали (мембраны, клапаны);
- недостатки, возникшие в результате нарушения правил эксплуатации и хранения;
- повреждения, вызванные в результате использования изделия в профессиональных целях;
- повреждения, вызванные самостоятельным изменением владельцем конструкции изделия или его комплектующих, а также неквалифицированно произведенного ремонта НЕ в гарантийном центре Nuvita.

Условия Гарантии регулируются Законом РФ «О защите прав потребителей» и гарантийной политикой продавца/сервисного центра.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	Гарантия 1 год	
	____/____/____ Дата продажи	
	_____ Серийный номер	_____ Печать магазина

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР NUVITA

Москва ООО «Кид Трейд»
Адрес: ул. Алабяна, д. 12, корп. 2
Тел.: +7 (800) 775-67-39, доб. 5

E-mail: service@edmgroupp.ru
Режим работы:
пн-чт с 09:00 до 18:00, пт с 09:00 до 17:00

Производитель:

«Anteprima Brands International Ltd»

1 Ferris building, St.Luke's Street, PTA1020 Guardamangia, Мальта, GLN 5358010000219

Сделано в Китае.

Поставщик/Импортер: ООО «Кид Трейд», 125080, г. Москва, ул. Алабяна, д.12, корп.2.

Тел: +7 (495) 648-64-24.

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Срок службы – 3 года.

Внимание! Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Прибор не является медицинским изделием.

Товар сертифицирован. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

www.nuvita-baby.ru

nuvita baby



1282C
Materno Go
Электрический
молокоотсос

Инструкция по эксплуатации

Дорогой покупатель, вы приобрели один из самых современных и надежных молокоотсосов на рынке – молокоотсос MATERNO GO бренда Nuvita. Мы разработали данное устройство, чтобы оно было максимально удобным в использовании. Пожалуйста, прочтите и сохраните данную инструкцию, чтобы иметь полное представление о всех преимуществах молокоотсоса.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед началом использования.
- Данный продукт предназначен только для взрослых.
- Используйте только оригинальный адаптер питания, поставляемый в комплекте.
- Не скручивайте и не завязывайте узлом соединительную трубку (№ 10 на схеме) в процессе использования.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Ни в коем случае не вскрывайте блок управления молокоотсосом (№ 9 на схеме) самостоятельно; это должен делать только производитель или специалист.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед использованием проверьте комплектацию. Если вы обнаружили, что не хватает одной или нескольких деталей или имеются повреждения, обратитесь к продавцу:

1. Защитная накладка
2. Силиконовая накладка-массажер
3. Молокоотсос с воронкой
4. Силиконовая вставка
5. Крышка
6. Лепестковый клапан
7. Бутылочка 150 мл
8. Силиконовый антиколиковый клапан
9. Блок управления
10. Силиконовая трубка
11. Крышка для бутылочки
12. Сменная соска
13. Кольцо для соски
14. Адаптер питания
15. Мешочек для хранения (на фото отсутствует)

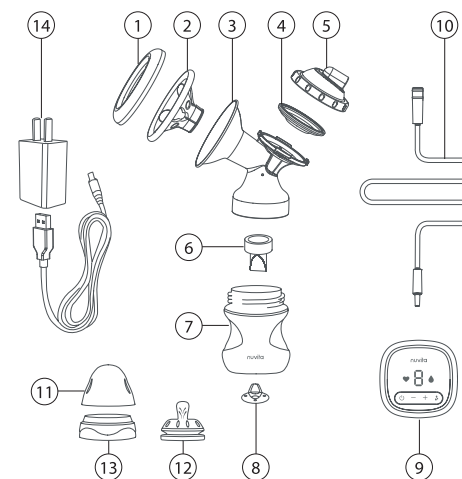

EAC

ОЧИСТКА

- Перед очисткой и стерилизацией отсоедините детали, контактирующие с грудью или грудным молоком (кроме блока управления (№ 9 на схеме)).
- Не мойте блок управления молокоотсосом (№ 9 на схеме) в воде.
- Не стерилизуйте блок управления молокоотсосом (№ 9 на схеме) в паровом стерилизаторе.
- Не проводите тепловую стерилизацию силиконовой трубки (№ 10 на схеме). Рекомендуется только холодная стерилизация. В противном случае очистите теплой водой с мылом, а затем промойте чистой водой.
- Все детали нужно промывать сразу после каждого использования, чтобы избежать попадания остатков молока и размножения бактерий.
- Положите чистые детали на сухое полотенце в прохладное место.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Перед Вами одинарный электрический молокоотсос Materno Go для максимального увеличения сцеживания грудного молока. Он имитирует поведение младенца при сосании.

1. Молокоотсос имеет двухфазную технологию: 1-я фаза с 9 уровнями автоматической стимуляции с работой в течение 2 минут. 2-я фаза с 9 регулируемыми уровнями сцеживания на Ваш выбор.
2. Устройство оснащено антирефлюксной системой, которая предотвращает возврат грудного молока в блок управления и повреждение молокоотсоса в процессе сцеживания.
3. Молокоотсос оснащен функцией памяти Memory function.
4. Молокоотсос работает от сети и от перезаряжаемой батареи, поэтому его можно взять с собой в поездку и использовать на работе.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

- A1. Кнопка включения и выключения
A2. Кнопка выбора режима
A3. Кнопка увеличения уровня всасывания
A4. Кнопка уменьшения уровня всасывания
B1. Индикатор уровня
B2. Индикатор режима стимуляции
B3. Индикатор режима сцеживания

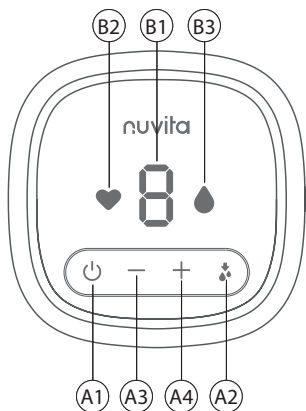

УРОВНИ ЧАСТОТЫ ВСАСЫВАНИЯ МОЛОКООТСОСА NUVITA 1282M:

♥ 1-9


Режим стимуляции с быстрым и коротким уровнем всасывания

💧 1-9

Режим сцеживания (имитирует сосание ребенка). Уровень всасывания этой фазы более медленный, глубокий и продолжительный.


СБОРКА МОЛОКООТСОСА

1. Наденьте силиконовую накладку-массажер (№ 2 на схеме) на воронку как показано на рисунке 1.
2. Установите силиконовую вставку (№ 4 на схеме) и защитную крышку (№ 5 на схеме) как показано на рисунке 2 и плотно закрутите крышку.
3. Установите лепестковый клапан (№ 6 на схеме) как показано на рисунке 3.
4. Плотно прикрутите бутылочку к корпусу молокоотсоса.
5. Вставьте один конец силиконовой трубки (№ 10 на схеме) в гнездо на верхней крышке, а другой – в разъем блока управления.

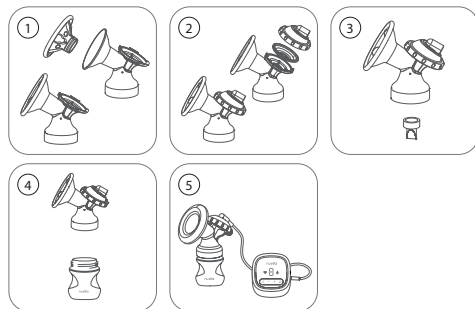

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


1. Всегда мойте руки перед использованием. Убедитесь, что детали молокоотсоса промыты и собраны точно в соответствии с инструкцией.
2. Займите удобную позу и расслабьтесь. Для лучшего эффекта используйте согревающие гелевые накладки для груди или горячее полотенце перед сцеживанием молока.
3. Направьте центр воронки молокоотсоса на сосок и убедитесь, что она плотно прилегает и не пропускает воздух внутрь.
4. Включите питание, нажав и удерживая кнопку питания. Экран устройства загрузится и начнет мигать. Затем молокоотсос перейдет в режим стимуляции. По умолчанию установлен уровень 5. После 2 минут работы в режиме стимуляции устройство автоматически переключится в режим сцеживания. Молокоотсос автоматически отключается после 30 минут работы.
5. В режиме сцеживания нажмите кнопку + или - для выбора уровня от L1 до L9. Устройство обладает функцией запоминания Memory function. При следующем сцеживании последний выбранный вами режим будет сохранен.
6. Разберите молокоотсос, промойте и простерилизуйте все неэлектронные детали.

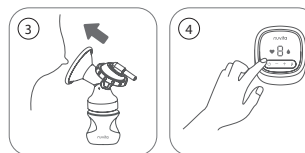

УСТАНОВКА АДАПТЕРА ПИТАНИЯ

ВАЖНО: отключите устройство перед подключением к адаптеру.

1. Вставьте круглый штекер в гнездо на блоке управления, а другой конец адаптера в розетку, как показано на схеме.
2. При низком заряде батареи цифра на экране (индикатор уровня) будет мигать, указывая на то, что батарее необходимо зарядить.
3. Во время зарядки линия на экране будет перемещаться по часовой стрелке и мигать, указывая на то, что устройство находится в режиме зарядки (см. рисунок 3). Когда устройство будет полностью заряжено, индикатор автоматически отключится.

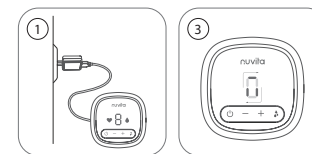

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы постарались тщательно продумать каждую деталь, комплектацию изделия и прилагаемую документацию для Вашего удобства. Поэтому в случае возникновения проблем при использовании молокоотсоса рекомендуем еще раз повторить все операции, точно следуя инструкциям в руководстве. Для получения дополнительной информации о товаре зайдите на сайт www.nuvita-baby.ru.